



**MEDIT *i700* wireless**



# Magia con un semplice tocco!

*Ottieni il potere per portare la tua attività a un livello superiore!*

# Oltre la tecnologia comprovata dell'i700

Lo stesso i700 super veloce, leggero e preciso. Ma ora senza cavi.



## Niente più cavi

Senza cavi, la scansione è comoda da qualsiasi Scansiona facilmente le aree prossimali senza vincoli di movimento.



## Veloce, preciso. Collegato

Velocità di scansione fino a 70 FPS\*. Ora è possibile sperimentare e prestazioni di scansione incredibilmente fluide e veloci del modello più venduto di Medit. Goditi l'alta velocità dell'i700, senza cavi e



## Supercarico ma leggero

Eccezionale bilanciamento del peso anche con una batteria collegata per maggior comodità.




## Un hardware potente incontra un software versatile

Ottimizzato per la convenienza. Non solo negli aspetti ma anche in quelli del software. i700 wireless, arricchito con lo stato dell'arte della tecnologia MEDIT.

\*Fotogrammi al secondo: numero di fotogrammi di dati di scansione al secondo.

- Precisione dell'arcata completa:  
10.9  $\mu\text{m} \pm 0.98$
- Fino a 70 FPS

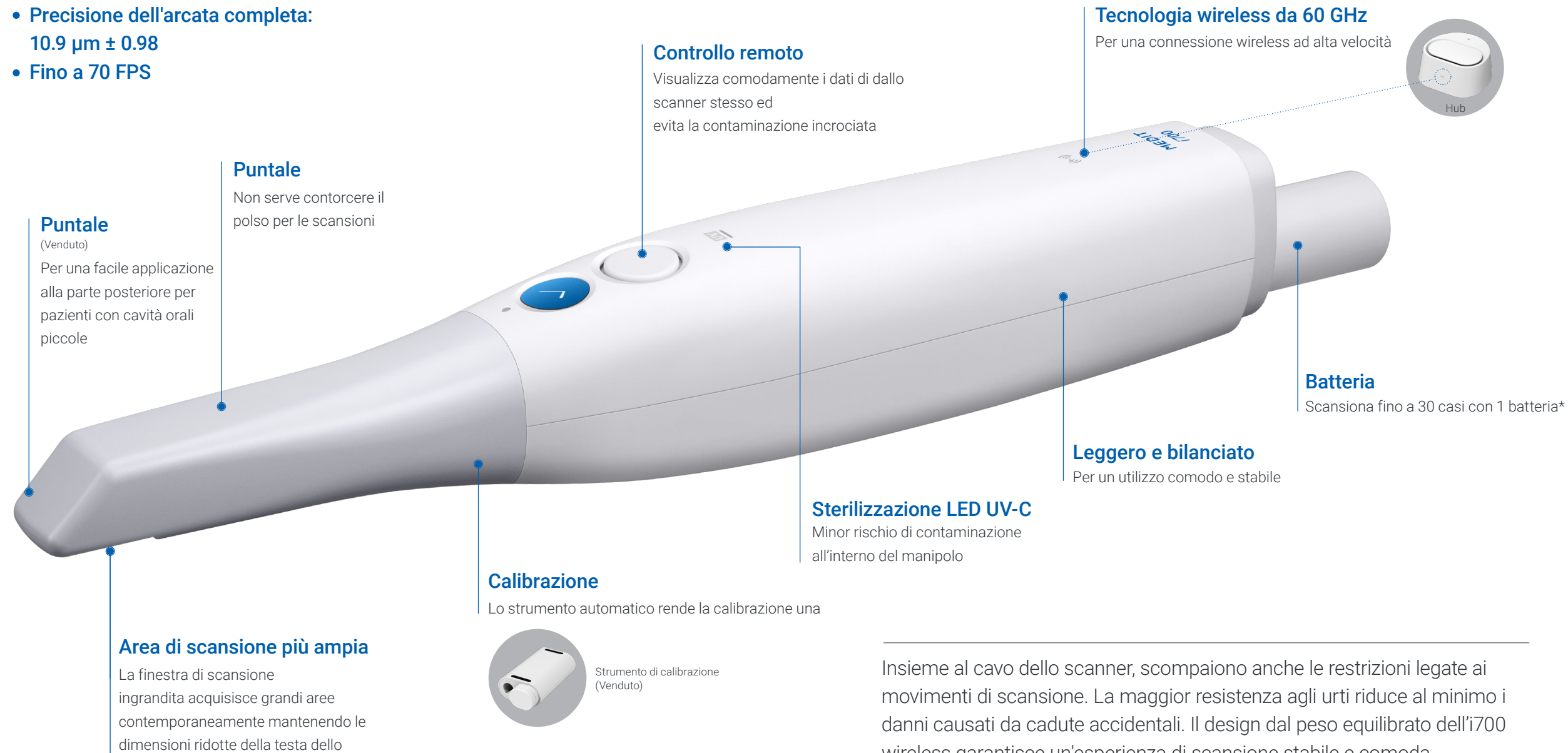

Insieme al cavo dello scanner, scompaiono anche le restrizioni legate ai movimenti di scansione. La maggior resistenza agli urti riduce al minimo i danni causati da cadute accidentali. Il design dal peso equilibrato dell'i700 wireless garantisce un'esperienza di scansione stabile e comoda.

\*Le prestazioni potrebbero variare a seconda delle condizioni di utilizzo.






# La Miglior Durata della Batteria di Sempre

**1 ora** di scansioni continue, **fino a 8 ore** in modalità standby




**Scansioni continue** con un'**Unica Batteria**. Scansiona tutto il giorno senza preoccuparti di caricarla.

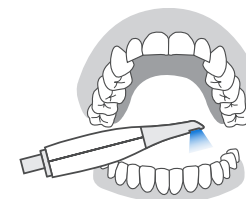

Scansione Mascellare +  
Mandibolare + Occlusione  
Tempo totale di  
scansione di  
**2 mins\***




Fino a  
**30 casi**  
con 1 batteria

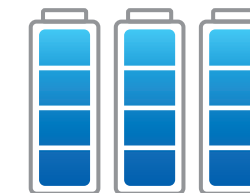

Fino a **90 casi**  
usando le 3  
batterie incluse



La funzione di gestione intelligente dell'alimentazione mette automaticamente il dispositivo in modalità sospensione quando non è in uso, restando in stand-by fino a 8 ore. Ci vogliono pochi secondi per riattivare il dispositivo per la scansione.

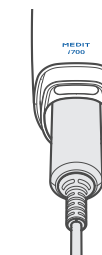

**Collegamento di alimentazione cablata:**  
collegare il cavo di alimentazione per continuare a usare il

\*Le prestazioni potrebbero variare a seconda delle condizioni di utilizzo.


# Una scansione magica, più facile che mai



Sperimenta un'incredibile esperienza di odontoiatria digitale con **Medit Scan for Clinics**.  
La nostra tecnologia software all'avanguardia rende le scansioni più comode per te.


## Per assistenza alla scansione

### Smart Scan Guide

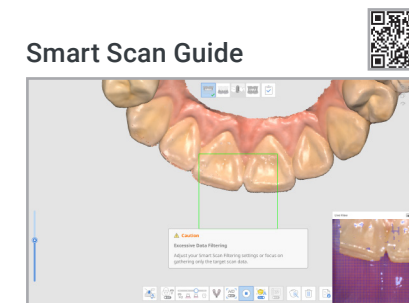


La guida utente potenziata fornisce assistenza per eventuali anomalie rilevate

### Smart Scan Filtering

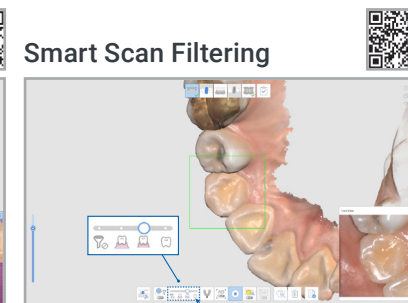


Prestazioni di filtraggio I.A. migliorate facilitano il processo di scansione filtrando i tessuti molli come labbra, guance e lingua.

### Smart Color Filtering

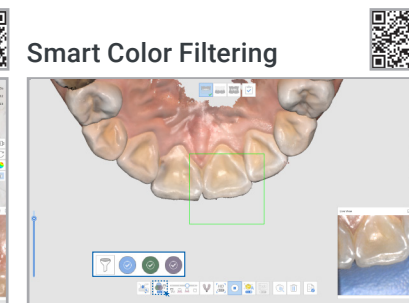

Filtra automaticamente i colori, come quello dei guanti medicali, durante la scansione.

### Smart Stitching

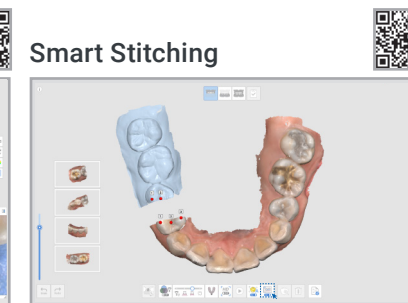

Scansiona seguendo la tua strategia di scansione dati di scansione frammentati sono allineati con l'area comune rilevata automaticamente

## Per dati di scansione più precisi e accurati

### Smart Shade Guide




Distingue automaticamente e suggerisce la miglior tonalità corrispondente

### A.I. Scan Body Matching




Assicura dati accurate dello scan body in aree di scansione difficili da raggiungere

### A.I. Abutment Matching

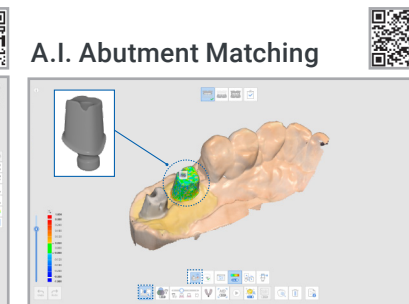

Garantisce dati di margine accurati in Situazioni difficili da scansionare

### HD Mode

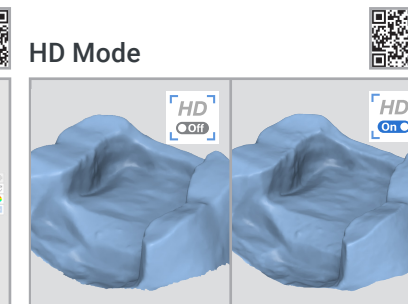

Ottieni un'immagine più nitida con la nuova modalità hd



# Medit Link

Inizia la dei dati della tua clinica con **Medit Link**.



È possibile creare e gestire i dati di scansione associati alle informazioni del paziente nel programma di cartelle elettroniche e collegarli a soluzioni terapeutiche di vari flussi di lavoro. Le diverse app dell'App Box di Medit Link contribuiscono a garantire standard di consultazione più elevati per rendere più semplice la comprensione da parte del paziente.

Il cloud storage di Medit Link crittografa e archivia tutti i dati per una protezione affidabile contro attacchi di virus e ransomware. Inoltre abilita la condivisione dei dati e la comunicazione in tempo reale tra dentisti, pazienti e tecnici di laboratorio sempre e ovunque su un computer, un tablet o qualsiasi dispositivo mobile provvisto di connessione Internet.

## Odontoiatria digitale con **Medit Link & Medit Apps**

Digitalizza il trattamento con Medit Link



## Usa i Tuoi Dati di Scansione per Molto Altro

I dati di scansione creati con l'i700 wireless di Medit possono essere collegati al flusso di lavoro di vari provider di soluzioni tramite Medit Link. I dati possono anche essere impiegati con qualunque software in grado di aprire formati 3D standard come STL, PLY e OBJ. E l'ampio utilizzo del nostro sistema aperto si sta espandendo in questo stesso momento.

### Cosa puoi fare in Medit Link:

Allineatori invisibili | Corone e ponti | Restauri su impianti | Protesi totali e parziali | Ortodonzia | Guide chirurgiche implantari | Dispositivi per apnee notturne  
Modelli dentali | Stampa 3D...




### Medit Apps

Medit Apps introduce rapidamente i flussi di lavoro digitali utilizzando i dati di scansione e ti aiuta a impiegarli in un'ampia gamma di casi. È possibile analizzare i dati, creare restauri e modelli e comunicare con i pazienti nel modo più semplice. Con Medit Apps, è possibile fare molto di più alla poltrona: ad esempio, progettare sprint, elementi provvisori, ponti e così via! A proposito, non sarà necessario disporre di uno scanner Medit o pagare un'ingente quota annuale per entrare a far parte dell'ecosistema Medit. Sentiti libero di goderti l'odontoiatria digitale con Medit Apps.

→ Scopri **l'Ecosistema Medit** alla pagina successiva



**Medit Apps**

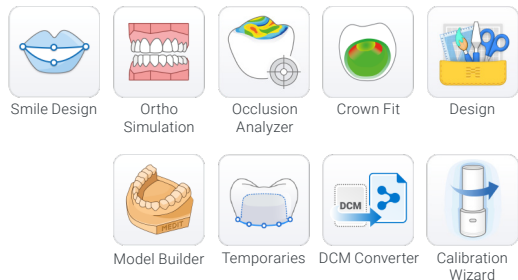

**Gestione pratica e diagnostica per immagini**



**CAD odontoiatrico e Design del Sorriso**




**Apnee notturne**




Integrazione


**Stampanti 3D**

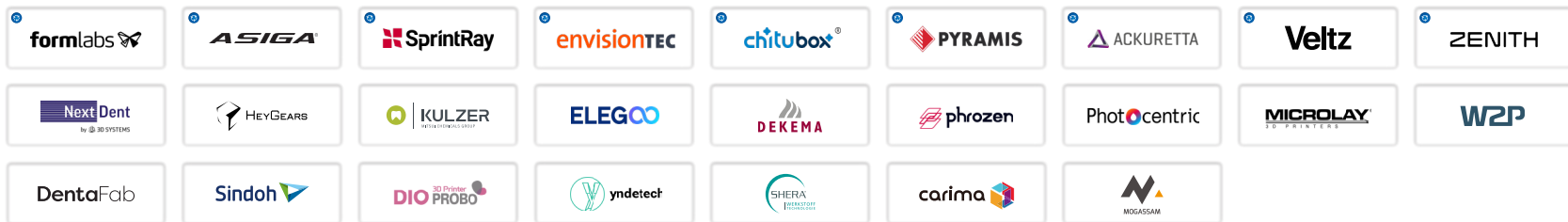

**Allineatori invisibili**

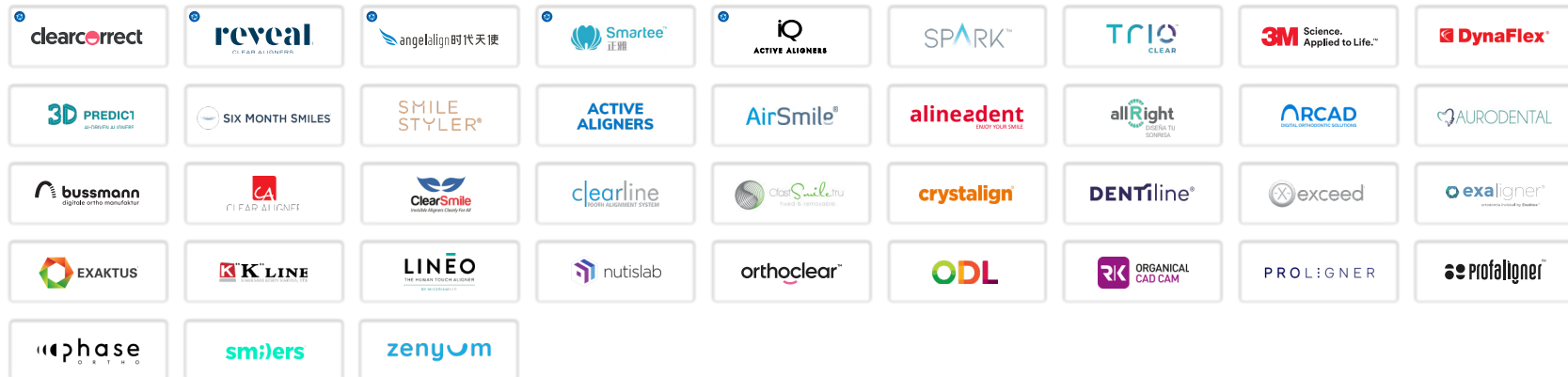

**Altri**

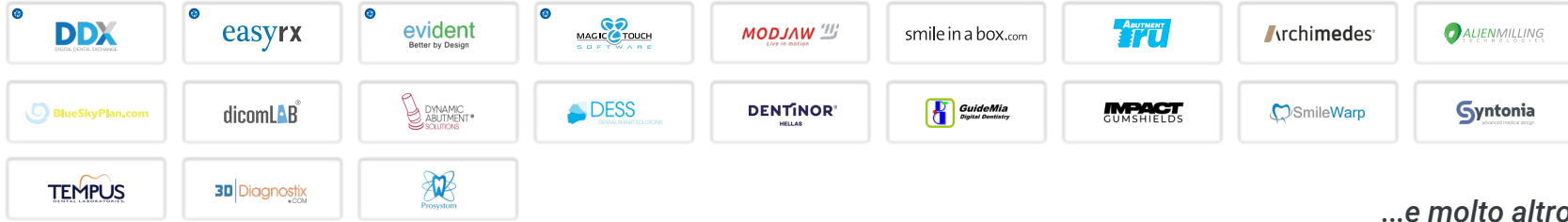

...e molto altro

# Specifiche

Categoria		Medit i700 wireless
Tecnologia di scansione	Frame di scansione	Fino a 70 FPS
	Tecnologia di imaging	Tecnologia video 3D in-motion   Acquisizione streaming 3D full color
	Sorgente LED	LED
	Tecnologia anti-appannamento	Anti-appannamento
Accuratezza	Arcata completa	10.9µm ± 0.98
Manipolo	Dimensioni	313 x 44 x 47.4 mm
	Peso totale	328 g (Inclusi batteria e puntale)
Puntal	Dimensioni del puntale	22.5 x 17.1 mm
	Area di	15 x 13 mm
	Autoclavabile	Autoclave 150 volte 121°C 30 mins (tipologia gravità) 134°C 4 mins (tipologia pre-vuoto) 135°C 10 mins (tipologia gravità)
	Puntale reversibile	Sì
Modalità speciale	Modalità controllo remoto	Sì
	Disinfezione UV-C	Sì
Connettività		Wireless USB 3.1 Gen1 (Hub Wireless)



Scansionare il codice QR per aggiornamenti [requisiti di sistema](#) >>

## Chi siamo

## la nostra community Medit



User Group



Medit Academy



Help Center

Medit è specializzata in misurazioni 3D e soluzioni CAD/CAM per studi e laboratori dentistici, inclusi scanner intraorali, basate sulla propria tecnologia brevettata e all'avanguardia. Sviluppiamo anche soluzioni di piattaforma per l'odontoiatria digitale, supportando flussi di lavoro collaborativi. In aggiunta, la linea Solutionix fornisce scanner 3D e software al mercato industriale. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione una tecnologia innovativa e prodotti di massima qualità per garantire una crescita comune a tutti i partner.

Feedback continui, consigli su nuovi flussi di lavoro terapeutici e discussioni attive.

Dai dibattiti accesi alle chiacchierate leggere, la community di Medit è sempre vibrante grazie ai nostri appassionati clienti.

Colleghi di tutto il mondo si supportano attivamente, si aiutano a vicenda e accolgono cordialmente i nuovi colleghi nel mondo dell'odontoiatria digitale.

Scansiona il codice QR per aderire!

Medit e la sua community di colleghi ti supportano e ti augurano un buon viaggio nell'odontoiatria digitale.







[www.medit.com](http://www.medit.com)

Italian